

BARD® selbsthaftende Kondomurinale aus Silikon

Die BARD® Kondomurinale sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, damit Sie das Kondomurinal mit dem komfortabelsten und sichersten Sitz auswählen können.

** Hilfsmittelnummern (Hi.Mi.Nr.) und Pharmazentralnummern (PZN) sind nur für Deutschland gültig.

Größe	▶ VE 30 Stück*			▶ VE 100 Stück*		
	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**	Bestell-Nr.	Hi.Mi.Nr.**	PZN**
ULTRAFLEX™ selbsthaftendes Kondomurinal aus Silikon - Style 1						
S (klein) - 25 mm	33301	15.25.04.7020	11136398	33101	15.25.04.7020	11136406
M (mittel) - 29 mm	33302	15.25.04.7020	11136412	33102	15.25.04.7020	11136441
Zwischengröße-32 mm	33303	15.25.04.7020	11136435	33103	15.25.04.7020	11136429
L (groß) - 36 mm	33304	15.25.04.7020	11136458	33104	15.25.04.7020	11136464
XL (extra-groß) - 41 mm	33305	15.25.04.7020	11136470	33105	15.25.04.7020	11136487
POP-ON™ selbsthaftendes Kondomurinal aus Silikon - Style 2						
S (klein) - 25 mm	32301	15.25.04.7021	11136636	32101	15.25.04.7020	11136642
M (mittel) - 29 mm	32302	15.25.04.7021	11136659	32102	15.25.04.7020	11136665
Zwischengröße-32 mm	32303	15.25.04.7021	11136671	32103	15.25.04.7020	11136688
L (groß) - 36 mm	32304	15.25.04.7021	11136694	32104	15.25.04.7020	11136702
XL (extra-groß) - 41 mm	32305	15.25.04.7021	11136719	32105	15.25.04.7020	11136725
WIDEBAND™ selbsthaftendes Kondomurinal aus Silikon - Style 3						
S (klein) - 25 mm	36301	15.25.04.7020	11136493	36101	15.25.04.7020	11136607
M (mittel) - 29 mm	36302	15.25.04.7020	11136518	36102	15.25.04.7020	11136501
Zwischengröße-32 mm	36303	15.25.04.7020	11136530	36103	15.25.04.7020	11136524
L (groß) - 36 mm	36304	15.25.04.7020	11136553	36104	15.25.04.7020	11136547
XL (extra-groß) - 41 mm	36305	15.25.04.7020	11136599	36105	15.25.04.7020	11136582

* einzeln steril verpackt

Weitere Informationen über die BARD® Kondomurinale aus Silikon und andere BARD® Produkte erhalten Sie von unserem Außendienst oder unter www.bardurological.com



Jetzt Teil der
BARD® Homecare Urologie

C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100
www.bard.de

Bard Medica S.A.

MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene
Modocenterstraße 22 • A-1030 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30
www.bard.at

Bard Medica S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70
www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren. Bard, Pop-On, UltraFlex und WIDEBand sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum Ihres jeweiligen Herstellers. Copyright © 2015 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO010HC-D (03/2015) DACH


BARD® selbsthaftende Kondomurinale aus Silikon

ULTRAFLEX™
selbsthaftende Kondomurinale aus Silikon



Style 1

POP-ON™
selbsthaftende Kondomurinale aus Silikon

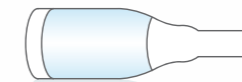

Style 2

WIDEBAND™
selbsthaftende Kondomurinale aus Silikon



Style 3



Wählen Sie Ihr selbsthaftendes Kondomurinal mit Zuversicht

Unsere Kondomurinale aus Silikon sind in drei Ausführungen erhältlich, damit Sie das Kondomurinal mit dem komfortabelsten und sichersten Sitz auswählen können.

Die Kondomurinale sind aus einem Stück gefertigt. Die profilierte Abflussöffnung gestattet den Abfluss des Harns, sogar wenn die Spitze verdreht oder unter der Kleidung abgeknickt ist. Die starke, dünne Silikonmembran dehnt sich sanft aus, um sich den Konturen des Penis und den Körperbewegungen anzupassen.

Dank des speziell entwickelten adhäsiven Materials, haften BARD® Kondomurinale aus Silikon fest am Platz und minimieren so die Gefahr einer Ablösung oder eines Urinabgangs.


Die Feuchtigkeit der Hautoberfläche kann langsam durch die Silikonmembran verdunsten, der Zustand der Haut kann durch das klare Silikon kontrolliert werden, ohne das Kondomurinal entfernen zu müssen.

ULTRAFLEX™

selbsthaftende Kondomurinale aus Silikon

Style 1

Standard Kondomurinallänge mit zentral liegender Haftbeschichtung.

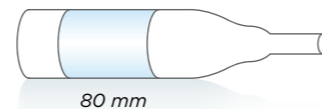


POP-ON™

selbsthaftende Kondomurinale aus Silikon

Style 2

Kürzere Kondomurinallänge mit Haftbeschichtung am distalen Ende. Style 2 passend für jede Penisgröße, besonders für den retrahierten Penis.

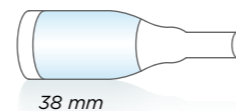


WIDEBAND™

selbsthaftende Kondomurinale aus Silikon

Style 3

Standard Kondomurinallänge mit zusätzlicher Haftfläche. Style 3 bietet zuverlässigen Schutz für den aktiven Mann. Insbesondere geeignet für Männer, die Schwierigkeiten mit der Haftung herkömmlicher Kondomurinale haben.

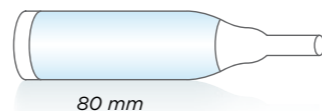

Silikon, die Wahl für die Umwelt

Rochester Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Medizinprodukte aus medizinisch zugelassenem Silikon zu entwickeln.

Medizinisch zugelassenes Silikon ist ein erstaunliches Material mit dem einzigartigen Potenzial, unsere Welt zu verbessern ohne unsere natürlichen Ressourcen in größerem Umfang zu dezimieren. Silikon kann sicher verbrannt oder unbedenklich auf Deponien abgebaut werden, da es schlussendlich wieder, ohne Freisetzung von schädlichen Chemikalien, zu Quarzsand zerfällt, aus dem es hergestellt wurde.



Sicher und komfortabel

Silikone bieten enorme Vorteile gegenüber Kunststoffen auf Erdölbasis. Dank ihres flexiblen „Rückgrats“ können sie geformt und ihre Eigenschaften verbessert oder verändert werden, um einer Vielzahl nützlicher Anwendungen zu entsprechen. Silikone verhärten sich nicht mit der Zeit und reagieren auch nicht mit anderen Materialien, sie unterstützen kein Wachstum von Bakterien und reizen nicht den Körper. Sie erzeugen weder unwillkommene Nebenprodukte, noch lösen sie allergische Reaktionen aus. Viele vertraute Alltagsgegenstände sind aus Silikonen hergestellt – von Dichtungen im Fensterrahmen und Badezimmer bis hin zu den weichen Hüllen für Mobiltelefone.

Medizinisch zugelassenes Silikon ist das ideale Material für Kondomurinale. Es ist weich und flexibel, um sich der Form Ihres Penis anzupassen und Sie haben durch das klare Silikon den Zustand Ihrer Haut im Blick.

Ihre Körperfeuchte kann durch die Silikonmembran einfach nach außen dringen und hilft, Ihr Kondomurinal sicher am Platz und Ihre Haut in gutem Zustand zu halten.

